



PROMOITALIA
WELLNESS RESEARCH

*ProWaveICE*TM
s m a r t c o l d r a d i o f r e q u e n c y



BeautyInstruments





STRUMENTS - PROWAVEICE
PROWAVEICE - PROMOITALIA
LIA - BEAUTY INSTRUMENTS
STRUMENTS - PROWAVEICE
PROWAVEICE - PROMOITALIA
LIA - BEAUTY INSTRUMENTS
STRUMENTS - PROWAVEICE
PROWAVEICE - PROMOITALIA
LIA - BEAUTY INSTRUMENTS
STRUMENTS - PROWAVEICE
PROWAVEICE - PROMOITALIA





TECHNOLOGY

The first triple action radiofrequency device. **Prowavelce** unites three technologies in one device allowing multiple applications.

Prowavelce is equipped with three different probes, each with a specific software in order to satisfy every patient's need.

The monopolar probe has an extended and deep action which is used for the body.

The bipolar probe has a more specific action in a more limited area and is used for facial and small areas of the body.

TECNOLOGIA


La prima macchina a radiofrequenza a tripla azione. **Prowavelce** riunisce 3 tecnologie in una sola apparecchiatura consentendo molteplici applicazioni.

Prowavelce dotata di tre diversi manipoli, ognuno con software specifico a secondo delle esigenze del paziente.

Il manipolo monopolare ha un azione estesa e profonda e viene utilizzato per il corpo

Il manipolo bipolare ha un azione pi specifica in un area pi circoscritta e viene utilizzato per il viso e per aree piccole



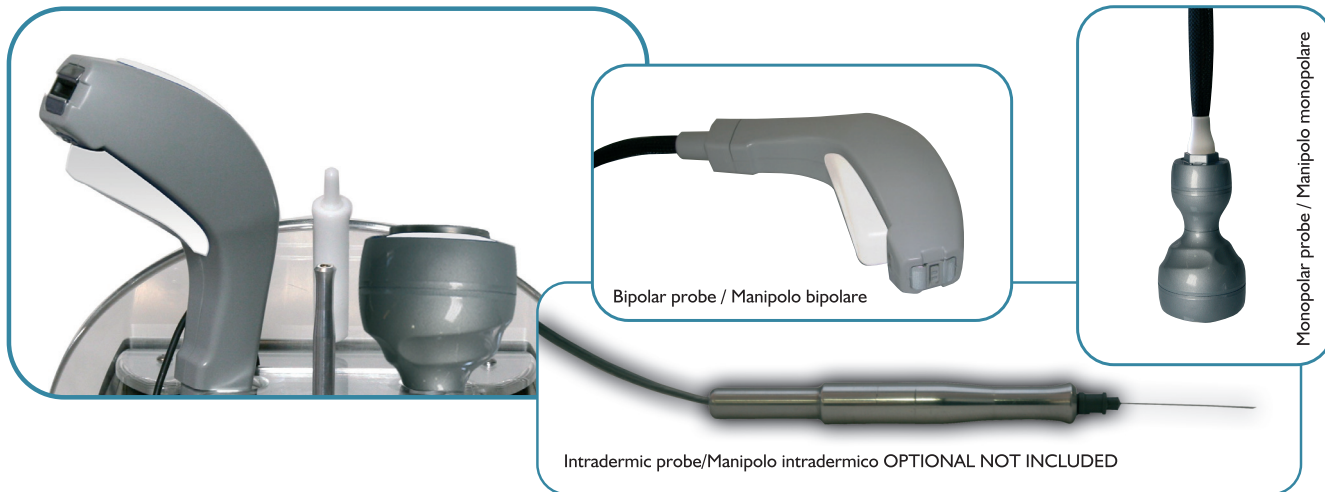

INTRADERMIC PROBE

The innovative intradermic probe (**Fibrologie**) has a built-in bipolar electrode and is directly used in the derma for the treatment of superficial and deep wrinkles.

Fibrologie is a new intra dermal technique for the treatment of superficial and deep wrinkles.

By using the linear retrograde technique, **Fibrologie** allows the formation of new collagen and the creation of a selective fibrosis to fill and stretch tissues.

Prowavelce is the first radiofrequency device with **Iced probes**, equipped with Peltier cells to protect the superficial layers of the derma, for a painless, comfortable and safe treatment.

MANIPOLO INTRADERMICO

L innovativo manipolo intradermico (**Fibrologie**) ha un elettrodo bipolare incorporato e viene utilizzato direttamente nel derma per il trattamento delle rughe superficiali e profonde


Fibrologie una tecnica intradermica innovativa per il trattamento delle rughe superficiali e profonde.

Utilizzando la tecnica lineare retrograda, **Fibrologie** consente la formazione di nuovo collagene e la creazione di una fibrosi selettiva per riempire e distendere i tessuti.

Prowavelce la prima macchina a radiofrequenza con **Manipoli ghiacciati**, dotati di celle di Peltier per salvaguardare gli strati superficiali del derma, per un trattamento indolore, confortevole e in totale sicurezza.



INDICATIONS/INDICAZIONI

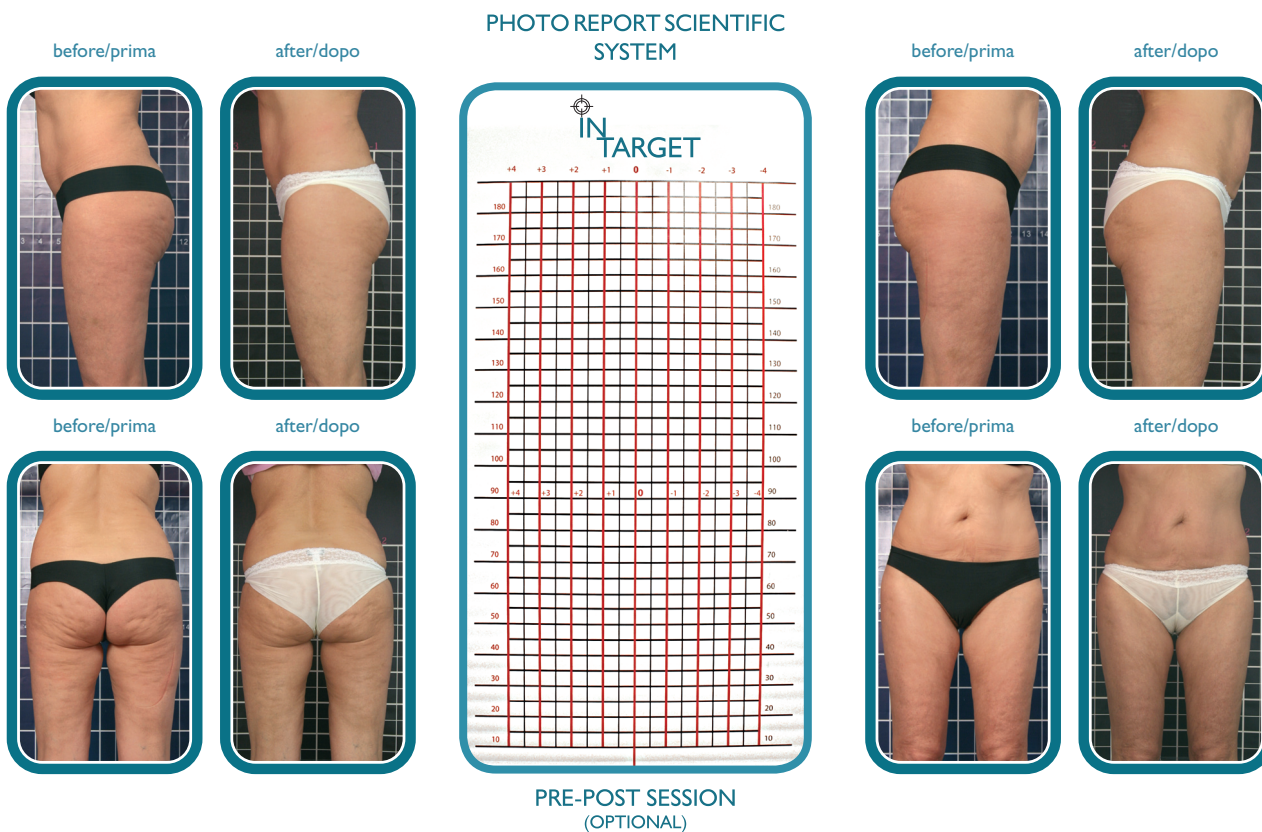

Indications for the body treatment:

- hypotonic skin
- stretch marks
- localized fat and cellulite
(with the addition of specific products that have a transdermic penetration)

Indications for the facial treatment:


- superficial and deep wrinkles
- hypotonic and aged skin

Indicazioni per il trattamento del corpo:

- pelle ipotonica
- smagliature
- grasso localizzato e cellulite (con l'aggiunta di prodotti specifici a penetrazione transdermica)

Indicazioni per il trattamento del viso:

- rughe superficiali e profonde
- pelle ipotonica ed invecchiata

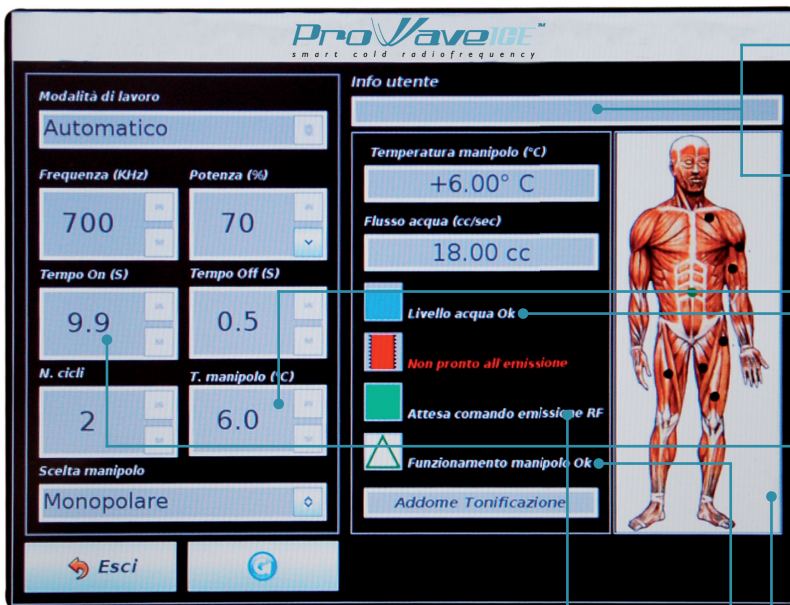

Treatment file and client management



Archivio trattamenti e gestione clienti

Database with patient cards



Database con scheda paziente

Digital probe temperature control



Controllo digitale temperatura manipoli

Vocal and visual control of water level



Controllo vocale e visivo livello di acqua

Digital work hours control



Controllo digitale ore di lavoro

Vocal guide during treatments



Guida vocale per il trattamento

Sonorous and vocal error alarms



Avviso eventuali errori con allarme sonoro e vocale

7 lingue | 7 languages



Vocal, visual and sonorous control of RF emission | Controllo vocale visivo e sonoro dell'emissione RF



Vocal and visual control of the correct probe/gel/skin positioning | Controllo vocale e visivo del giusto posizionamento manipo/gel/cute

Digital area treatment selection with pre-set program | Selezione zona trattamento digitale con programma prestatato

THE TECHNICAL SPECIFITIES

- Prowave is equipped with an adjustable menu.
- Continuous or pulsed radiofrequency emission (depending on the adjustment).
- Adjustable emission time from 0.5 sec to a maximum of 9.9 sec.
- Adjustable pause time from 0.5 sec to a maximum of 9.9 sec.
- Number of cycles (sum of the emission time + pause time) from a minimum of 1 to a maximum of 20.
- Maximum power emitted 100W rms.
- Frequency adjustable from 600Khz to 2200 KHz with an increase of 50Khz each step.
- Adjustable probe temperature from 16° to -6°.

THE NEW PROWAVE INCLUDES:

- 3 Probes (2 included, 1 optional)
- 2 Auto-refrigerating probes of which:
 - 1 Monopolar
 - 1 Bipolar (with on/off switch)
- 1 Subradio intradermic radiofrequency probe with bipolar electrode for fibrologie (available in three different measures: SOFT ø 0,35X30 mm - MID ø 0,35X40 mm - ULTRA ø 0,35X50 mm)
- 1 Pedal

LA NUOVA PROWAVE HA IN DOTAZIONE


- 3 Manipoli (2 inclusi, 1 optional)
- 2 Manipoli auto refrigeranti di cui:
 - 1 Monopolare
 - 1 Bipolare (con interruttore)
- 1 Manipolo subradio intradermico a radiofrequenza dotato di elettrodo bipolare per fibrologie (disponibile in tre differenti misure: SOFT ø 0,35X30 mm - MID ø 0,35X40 mm - ULTRA ø 0,35X50 mm)
- 1 Pedaliera

ProWaveTM
smart cold radiofrequency





ProWaveICE™
smart cold radiofrequency

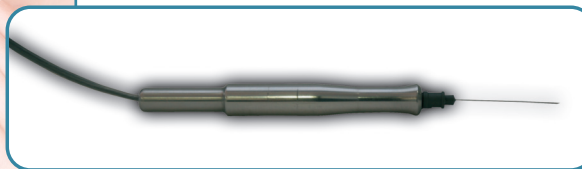

BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAFIA

PUBLISHED ARTICLES

1. Groves, Nancy. Radiofrequency Device Offers Advantages of its Own (featuring Brian D. Zelickson, M.D.). *Dermatology Times* Vol. 23, No. 7; July 2002.
2. Guttman, Cheryl. RF Heating Promising for Skin-Tightening, Browlifting (featuring Richard E. Fitzpatrick, M.D.). *Cosmetic Surgery Times* Vol. 5, No. 7 (02); August 2002.
3. Guttman, Cheryl. Skin Laxity Improvements Seen Vividly in Neck Areas (featuring Tina S. Alster, M.D.). *Cosmetic Surgery Times*; May 2003.
4. Kazanjian, Dodie. Facelift of the Future (featuring Roy Geronemus, M.D., Javier Ruiz-Esparza, M.D., Karyn L. Grossman, M.D., M.D., Pat Wexler, M.D.). *Vogue*; May 2003.

ABSTRACTS FROM THE AMERICAN SOCIETY FOR LASER MEDICINE AND SURGERY TWENTY-THIRD ANNUAL MEETING, ANAHEIM, CALIFORNIA APRIL 9-13, 2003

1. Goldberg DJ, Koch J, Burns J, Geronemus R. A New Non-Ablative Radio Frequency Device to Tighten Tissue: A Randomized Trial Comparing a Single Treatment to Multiple Treatments .
2. Alster TS, Tanzi EL. Treatment of Prominent Nasolabial Folds and Cheek Laxity with a Nonablative Radiofrequency Device .
3. Tanzi EL, Alster TS. Improvement of Neck Laxity with a Nonablative Radiofrequency Device: A Lifting Experience .
4. Fitzpatrick RE, Iyer S. Collagen and Tissue Tightening: Paradigm for Treatment of the Cheeks and Neck Using Radiofrequency .
5. Fitzpatrick RE, Geronemus R, Goldberg D, Klammer M, Kilmer S, Ruiz-Esparza, J. First Multi-Center Study of a New Non-Ablative Radio Frequency Device to Tighten Facial Tissue .
6. Ruiz-Esparza J. "Non-Ablative Radiofrequency Tissue Tightening of Facial Skin: The Medical Face-Lift: A Report of 25 Patients".
7. Weiss RA, Weiss MA, Beaseley KL. "Monopolar Radio Frequency (RF) Mediated Skin Contraction of the Lower Face: Study of 35 Patients".

ABSTRACTS FROM THE ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY FOR DERMATOLOGIC SURGERY, NEW ORLEANS, LOUISIANA OCTOBER 9-12, 2003

1. Alster TS. "Radiofrequency Treatment: A Non-Surgical Approach to Skin Tightening and Other Applications".
2. Ruiz-Esparza J. "The Non-Surgical Face-Lift Via Non-Ablative Radiofrequency".
3. Grossman KL. "Radiofrequency Treatments for Facial and Neck Laxity and Brow Ptosis".
4. Jacobson L. "One-Year Assessment Following Radiofrequency Treatment to the Lower Face and Neck".
5. Nahm W. "Radiofrequency applied to Half of Face Ipsilaterally Produces Elevation of The Brow, Changes in the Angle of the Eyebrow, and Improvement in Appearance of Melolabial Fold and Jaw".

CLINICAL ARTICLES

1. Fitzpatrick RE, Geronemus R, Goldberg D, Klammer M, Kilmer S, Ruiz-Esparza, J. "Multicenter Study of Noninvasive Radiofrequency for Periorbital Tissue Tightening". *Lasers in Surgery and Medicine* Vol. 33, No. 4; 2003.
 2. Iyer S, Suthamjaraiya K, Fitzpatrick RE. "Using a Radiofrequency Energy Device to Treat the Lower Face: A Treatment Paradigm for a Nonsurgical Facelift". *Cosmetic Dermatology* Vol. 16, No. 2; February 2003.
 3. Ruiz-Esparza J, Gomez JB. "The Medical Face Lift: A Noninvasive, Nonsurgical Approach to Tissue Tightening in Facial Skin Using Nonablative Radiofrequency". *Dermatol Surg* Vol. 29, No. 4, p 325-332; April 2003.
 4. Zelickson BD. "Histological and Ultrastructural Evaluation of the Effects of a Radiofrequency-Based Nonablative Dermal Remodeling Device". *Archives of Dermatology* Vol. 140, p 204-209; February 2004.
 5. Alster T.A., Tanzi E. "Improvement of Neck and Cheek Laxity With a Non-Ablative Radiofrequency Device: A Lifting Experience". *Dermatol Surg* Vol 30, p 503-507; April 2004.
- Book Chapters
6. Thompson DO, Choubal MV. Cyclodextrins (CDS) excipients by definition, drug delivery systems by function (part I: injectable applications). *Drug Delivery Technology*. 2002;2(7):34-38.



*Most of people think that beauty and wellness
depend on Nature and age.
We do not.*



PROMOLIGHT



MESOFLUX



PROSEKTION



PRO3SON



ProVaveice™
PROFESSIONAL MEDICAL EQUIPMENT



PROSLIMELT



PROKAIRE



PROELLIXE

Made in Provoitalia



PROMOITALIA - BEAUTY INS
BEAUTY INSTRUMENTS - PR
PROWAVEICE - PROMOITALI
PROMOITALIA - BEAUTY INS
BEAUTY INSTRUMENTS - PR
PROWAVEICE - PROMOITALI
PROMOITALIA - BEAUTY INS
BEAUTY INSTRUMENTS - PR
PROWAVEICE - PROMOITALI
PROMOITALIA - BEAUTY INS
BEAUTY INSTRUMENTS - PR
PROWAVEICE - PROMOITALI
PROMOITALIA - BEAUTY INS
BEAUTY INSTRUMENTS - PR



www.webpromoitalia.com
beauty.instruments@webpromoitalia.com

ITALIAN BRANCHES

Milan 20124
Via San Gregorio, 44 - ITALIA
Ph. +39 02 67 07 72 26
Fax +39 02 66 98 90 00

ASIAN BRANCH

Bangkok 10500
12th Floor, Bubbajit Building 20
North Sathorn Road - THAILAND
Ph. +0066 26 33 80 57
gm.asia.division@webpromoitalia.com

EXPORT OFFICE

Naples 80078
Via Antiniana, 59 - ITALIA
Ph. +39 081 55 85 118
Fax +39 081 22 92 267

Rome 00195
Via F. De Sanctis, 15 (Prati) - ITALIA
Ph. +39 06 375 11 826 - Showroom
Ph. +39 06 97 27 43 52
Fax. +39 06 97 27 43 10

PROMOITALIA MIDDLE EAST
Al Habtoor Warehouse n°41, Inds. thirds,
Al Quasais District - Dubai, U.A.E.
Ph. +971 42 58 57 58
Fax. +971 42 58 98 60
medical.device@webpromoitalia.com

